

# 天秤用リアルタイム計測ソフト Rs232c(シリアル)通信取り込みソフト

Windows 10、Office2016 まで対応

履歴管理版

## 主な内容

### 履歴管理版の主な機能

- 履歴管理 ソフト(システムメンテナンスを)を使用してシステム管理者がシステムのセキュリティ管理の設定が行えます。
  - 管理者、作業者の区分と登録、パスワードの有効期限と桁数やロックアウト回数、パスワードの変更履歴回数などの設定入力が行えます。
- WIN for METTLER audit は、次のような機能が有ります。
  - エクセルの標準シートにデータを取り込む一般秤量、時系列秤量、指定位置秤量などが出来ます。  
又、グラフシートを選択しデータを取り込んでデータ解析と分布図の表示を行う事が可能です。
  - 重量差測定として処理前、処理後の測定
  - 合否判定測定として上下限値の範囲測定
  - 天秤の点検記録  
などの計量機能を搭載し、データは保護管理されます。
- 履歴管理ソフト(データメンテナンス)を使用してデータ変更のセキュリティ管理を行います。
  - 測定後のデータを呼び出し、変更、修正、表示、印刷を行う事も出来ます。またこのデータの修正履歴も管理されます。

# WIN for METTLER Audit

## 販売元

メトラー・トレード株式会社  
ラボテック事業部

<http://www.mt.com/jp>

東京都台東区池之端 2-9-7

池之端日殖ビル 6F

TEL : 03-5815-5515

## 製造元

株式会社 テンプレート

販売商品企画部

<http://www.template.co.jp>

東京都大田区蒲田 4-29-5

高千穂ビル 6F

TEL : 03-3737-3346


# WIN For METTLER Audit (履歴管理版)

## 履歴管理1. システムメンテナンスによるシステムの導入と設定にてセキュリティ管理します。

管理者と作業者の区分と登録、パスワードの有効期限と桁数やロックアウト回数、パスワードの変更履歴回数  
の設定など、セキュリティ管理の設定を行います。

## 履歴管理2. WIN for METTLER Audit を起動しセキュリティ管理下でログインを行い測定します。

### A. WIN for METTLER Audit に LOG IN

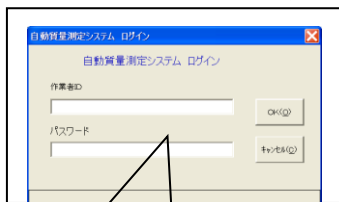

パッケージを起動してLOG IN  
でシステムに入ります



### B. メニューより実行する処理を選択致します。

R s 2 3 2 C通信からのデータ取込みを行う。  
通常測定 : 行、列、タイマー計測、指定位置秤量  
重量差 : 測定する対象物の重量の差を出します。  
合否 : 対象物の重量が指定の中に有るか、否かの判定を表示します。  
CAL : 天秤の校正を行い点検記録します。

実行する処理を選択します。

### C. 選択した処理のメニューが表示され計測ボタンをクリックして測定に入ります。

### D. 測定終了後、印刷及び保存を行います。



### E. 全ての測定が終わったら終了ボタンをクリックしてメニューに戻ります。

## 履歴管理3. データメンテナンスを起動して保存されたデータの変更等をセキュリティ管理します。

測定結果ファイルのデータを変更する事が出来ませんが、変更する場所の登録をシステム管理者など、  
セキュリティに応じた権限を設定して有りますので誰しもがデータ変更を行う事が出来る訳ではありません。  
また、変更履歴は全て残されますので何時、誰が、何処で、何を、どの様に変更したのかを印刷して確認する  
事が出来ます。

製造元  
株式会社 テンプレート  
システム営業部  
電話 03-3737-3346  
FAX 03-3737-3347  
<http://www.template.co.jp>

<商品に関するお問い合わせ>